

# myRogerMic 1.0

Návod na použitie



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

## Začíname

myRogerMic je aplikácia vyvinutá spoločnosťou Sonova, svetovou jednotkou v oblasti posluchovéch riešení so sídlom vo švajčiarskom Zürichu. Dôkladne si prečítajte tento návod na používanie, aby ste mohli naplno využívať všetky možnosti, ktoré ponúka.

### Určené použitie

Aplikácia myRogerMic je určená na výber, nastavenie a uloženie existujúcich funkcií zariadenia Roger On™ a na bezdrôtový prístup k informáciám o stave a ich vizualizáciu.



#### Informácie o kompatibilite:

Na použitie aplikácie myRogerMic sa vyžaduje zariadenie Phonak Roger On™ alebo Phonak Roger On™ iN.

Aplikáciu myRogerMic možno používať v telefónoch s funkciou Bluetooth® Low-Energy (LE) s verziou iOS® 13 alebo novšou.

Táto aplikácia sa môže používať so zariadeniami Android™ s certifikátom Google Mobile Services (GMS), ktoré podporujú technológiu Bluetooth® 4.2 a Android™ s OS 7.0 a novšími verziami.

Slovné označenie Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známk spoločnosťou Sonova AG je licencované.

iPhone® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.


Android™ je ochranná známka spoločnosti Google LLC

iOS® je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Cisco Systems, Inc. a/alebo jej sesterských spoločností v USA a niektorých ďalších krajinách spoločnosti Cisco Inc.

## Obsah


Začíname	2
Stručný prehľad	3
Inštalácia aplikácie myRogerMic	4
Párovanie so zariadením Roger On	5
Riešenie problémov s párovaním	6
Riešenie problémov s pripojením so zariadením Roger On	7
Funkcie režimu mikrofónu	8
Riadenie smeru prenosu	9
Vytvorenie vlastného režimu	10
Technológia MultiBeam 2.0	11
Pridanie, výber a odstránenie zariadenia (zariadení) Roger On	12
Sieť MultiTalker	13
Ďalšie funkcie	14
Dôležité bezpečnostné informácie, vysvetlenie symbolov	15

## Stručný prehľad

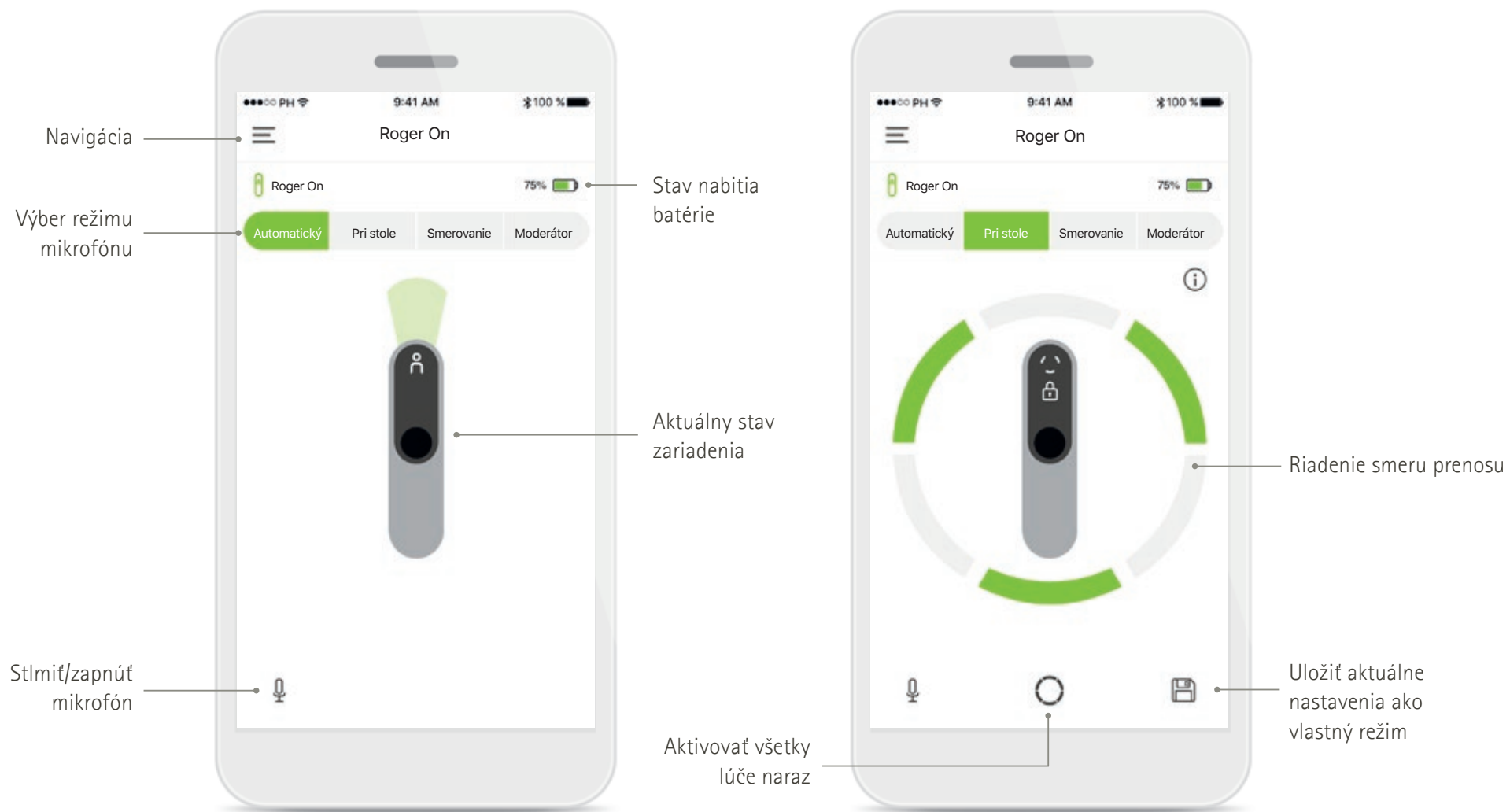


# Inštalácia aplikácie myRogerMic

- Pripojte svoj smartfón k internetovej sieti pomocou pripojenia Wi-Fi alebo mobilných dát.
- Zapnite funkciu Bluetooth® vo svojom smartfóne.

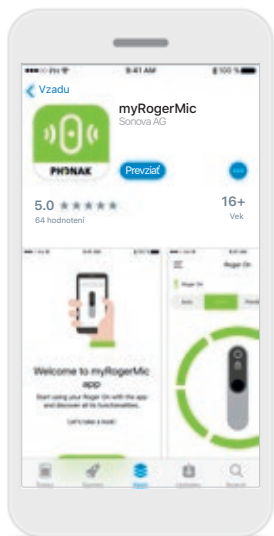


## Stiahnutie aplikácie myRogerMic

Stiahnite si aplikáciu z obchodu. Po nainštalovaní otvorte aplikáciu myRogerMic.

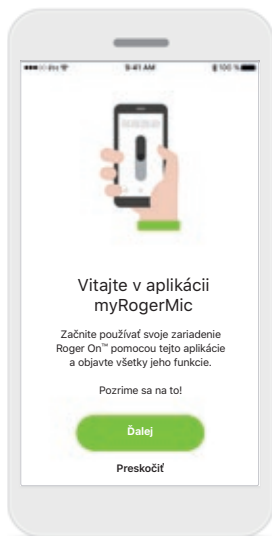


## Otvorenie aplikácie myRogerMic

Otvorte aplikáciu a kliknite na možnosť **Ďalej** alebo **Preskočiť** registračné informácie.

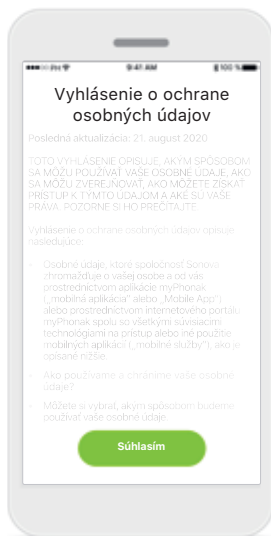

## Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ak chcete používať túto aplikáciu, na pokračovanie musíte kliknutím na možnosť **Súhlasím** vyjadriť súhlas s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

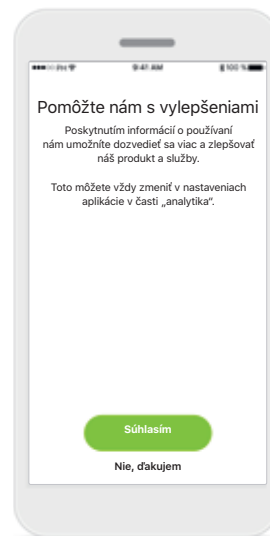

## Vylepšenie produktu

Zdieľaním údajov o používaní nám pomôžete vylepšovať naše produkty.


Kliknite na možnosť **Súhlasím**, ak chcete zdieľať anonymné údaje o používaní, alebo na možnosť **Nie, ďakujem**, ak si to neželáte.

## Párovanie so zariadením Roger On


Ak chcete pripojiť zariadenie Roger On pomocou aplikácie myRogerMic, postupujte podľa pokynov nižšie. S touto aplikáciou môžete spárovať až desať zariadení Roger On. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako pridať viac zariadení, prejdite na časť Pridať, vyberte a odstráňte svoje zariadenie(a) Roger On.




**Pokyny na spárovanie**  
Postupujte podľa pokynov uvedených na obrazovke a ťuknite na možnosť **Pokračovať**.

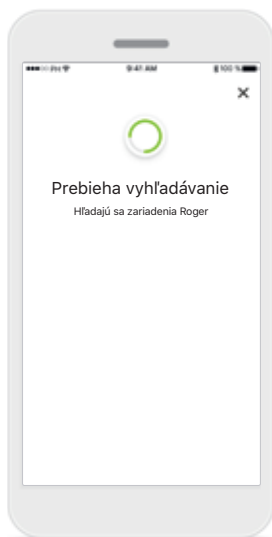


**Prebieha vyhľadávanie**  
Aplikácia vyhľadá zariadenia Roger On a po ich nájdení ich zobrazí. Môže to trvať niekoľko sekúnd.

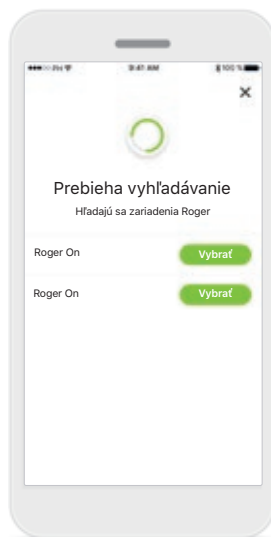

**Vybrať**  
Ťuknite na možnosť **Vybrať**, keď sa vaše zariadenie Roger On objaví v zozname. Súčasne nemôžete párovať viacero zariadení Roger On. Každé zariadenie Roger On sa musí spárovať zvlášť.

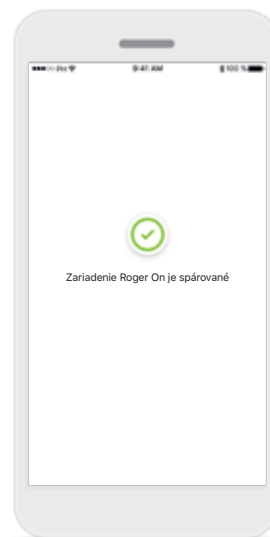


**Párovanie dokončené**  
Zariadenie Roger On je teraz spárované. Aplikácia automaticky prejde na nasledujúci krok.

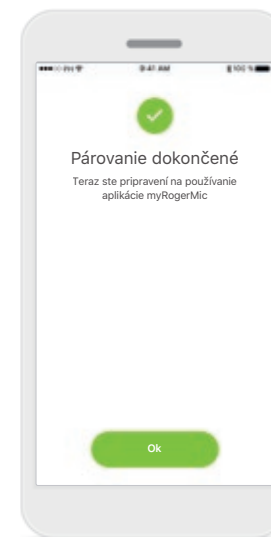

**Nastavenie je dokončené**  
Teraz ste pripravení na používanie všetkých funkcií v aplikácii myRogerMic. Ťuknutím na **Ok** získate prístup k hlavnej obrazovke.


# Riešenie problémov s párovaním

Možné chyby počas procesu nastavenia.

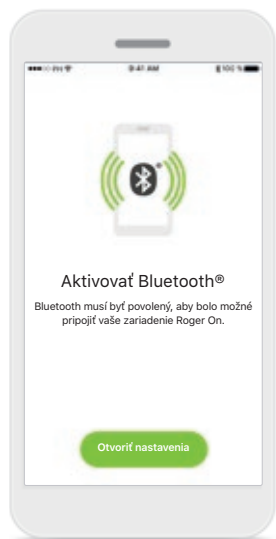


## Bluetooth – iOS

Vaše mobilné zariadenie musí mať zapnutú funkciu Bluetooth, aby sa mohlo spárovať so zariadením Roger On. Ak máte iPhone, môžete tak urobiť ťuknutím na tlačidlo **Otvoriť nastavenia**.

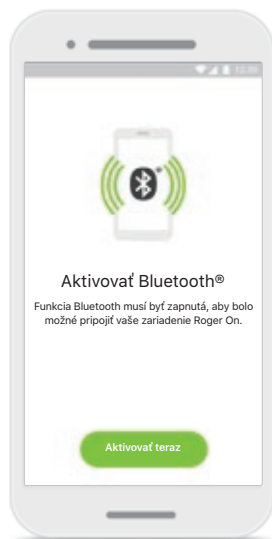


## Bluetooth – Android

Vaše mobilné zariadenie musí mať zapnutú funkciu Bluetooth, aby sa mohlo spárovať so zariadením Roger On. Ak máte zariadenie Android, môžete túto funkciu zapnúť ťuknutím na tlačidlo **Aktivovať teraz**.

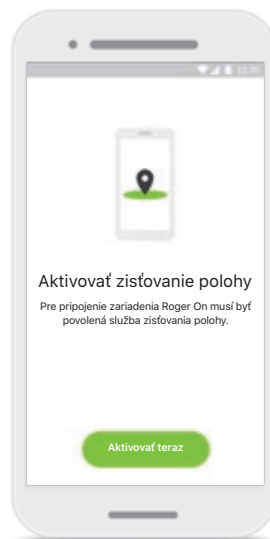

## Poloha

Na zariadeniach Android musíte pri prvom párovaní zariadení s Bluetooth aktívovať službu zisťovania polohy. Po prvotnom nastavení môžete službu zisťovania polohy znova vypnúť.

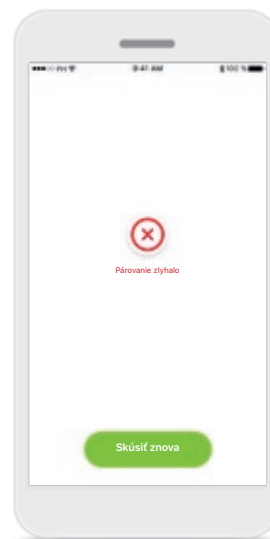


## Párovanie zlyhalo

Ak párovanie zlyhalo, môžete postupovať nasledujúcim spôsobom:

1. Ťuknutím na možnosť **Skúsiť znova** reštartujte proces párovania.
2. Zatvorte aplikáciu a začnite úplne od začiatku.

# Riešenie problémov s pripojením zariadenia Roger On

Možné chyby pri pripojení zariadenia Roger On.

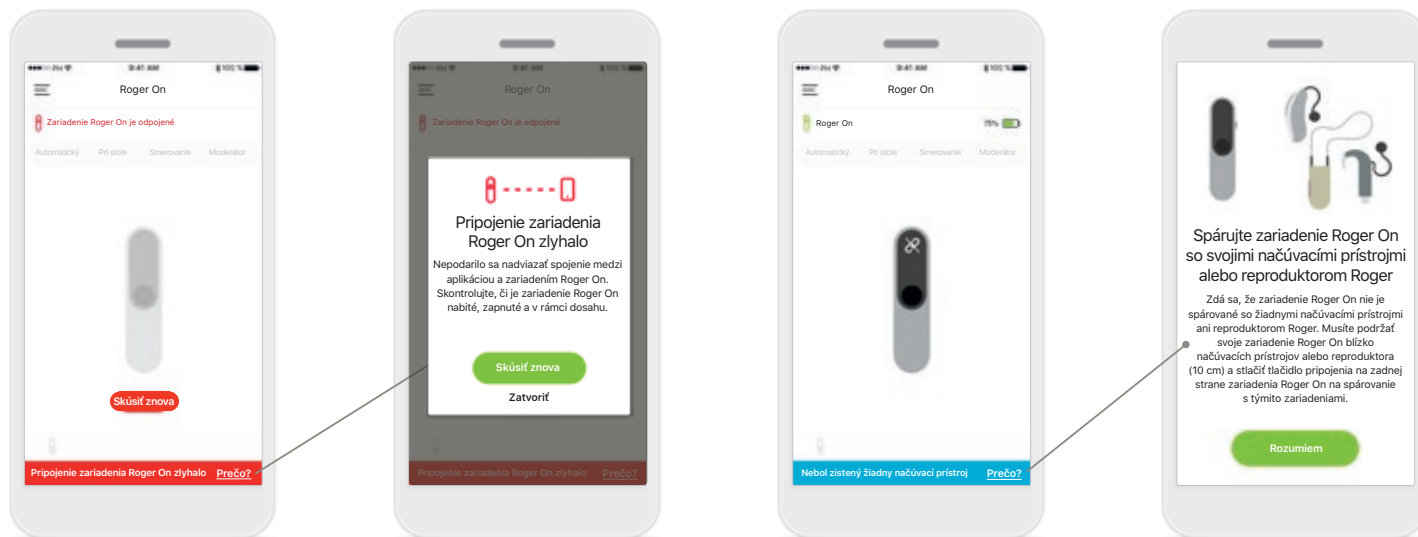

## Pripojenie zlyhalo

Ak sa aplikácii myRogerMic nepodarí spojiť s vaším zariadením Roger On, znova sa pokúste o pripojenie, keď skontrolujete nasledujúce:

- Zariadenie Roger On je zapnuté a batéria nie je takmer alebo úplne vybitá.
- Zariadenie Roger On je v dosahu vášho mobilného zariadenia Bluetooth.


## Pripojenie zlyhalo – pokyny

Ťuknutím na tlačidlo **Prečo** zistíte, prečo pripojenie zlyhalo, a nájdete tu pokyny na nadviazanie pripojenia.

## Nebol zistený žiadny načúvací prístroj

Vaše zariadenie Roger On nie je spárované s vaším načúvacím prístrojom (prístrojmi). Ťuknite na tlačidlo **Prečo**, kde nájdete pokyny na spárovanie zariadenia Roger On s vaším načúvacím prístrojom (prístrojmi) alebo reproduktorom Roger.


## Funkcie režimu mikrofónu\*

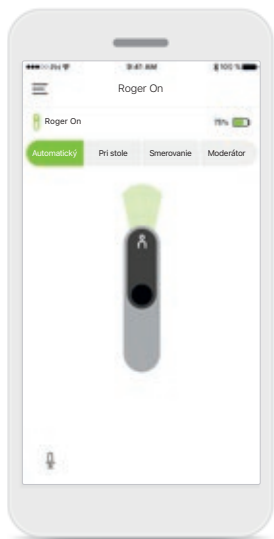

### Automatický režim


Keď je zariadenie Roger On v automatickom režime, nastaví svoje mikrofóny podľa toho, ako je zariadenie Roger On umiestnené.

Režim mikrofónu je zobrazený na obrazovke zariadenia Roger On.

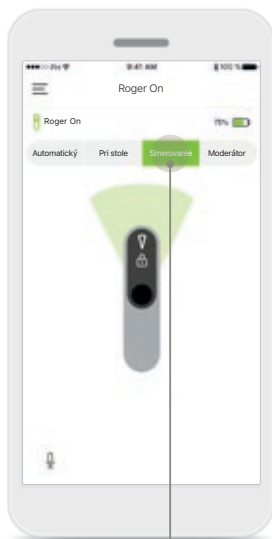

### Zamknutie režimu mikrofónu

Ťuknite na režim mikrofónu, ktorý chcete použiť. Zariadenie Roger On bude teraz zamknuté vo zvolenom režime mikrofónu.

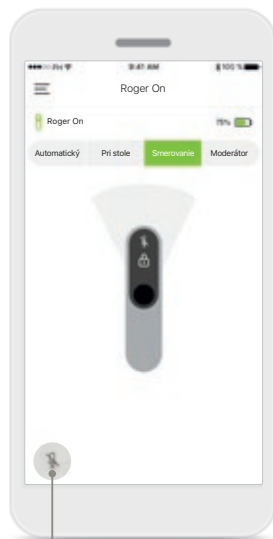

### Stlmiť/zapnúť mikrofón




Zariadenie Roger On môžete stlmiť a znovu zapnúť mikrofón stlačením ikony mikrofónu.

\*Ak chcete zistiť viac o funkciách rôznych režimov mikrofónu, pozrite si návod na použitie zariadenia Roger On.



## Riadenie smeru prenosu

Keď je zariadenie Roger On umiestnené na stole, môžete pomocou technológie MultiBeam zlepšiť zrozumiteľnosť reči v hlučnom prostredí.<sup>1</sup> Napríklad, pri skupinovej konverzácii v reštaurácii nemusí byť hovoriaci, ktorého práve počujete, predmetom záujmu. Môže sa to stať napríklad vtedy, ak začne konverzácia na boku toho istého stola. V takomto prípade aplikácia myRogerMic umožňuje zmeniť smer prenosu a upriamiť ho na hovoriaceho, ktorý je predmetom záujmu.

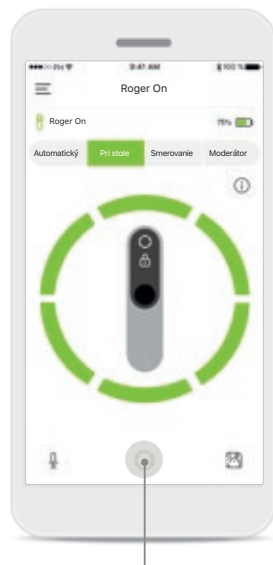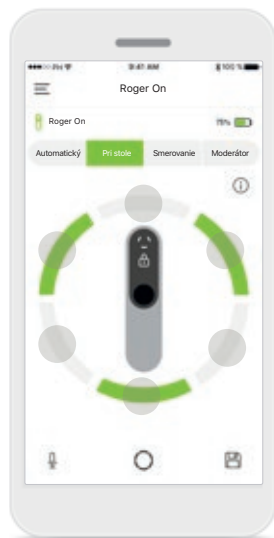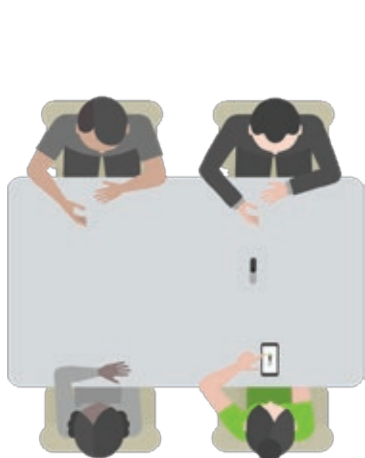

### Režim Pri stole

Umiestnite zariadenie Roger On do stredu stola. Pre lepší efekt položte zariadenie Roger On na stôl tak, aby nabíjací port smeroval k vám alebo do rovnakej polohy, ako je znázornené v aplikácii.

### Aktivovať/deaktivovať lúče

Ťuknutím na segment ho aktivujete/deaktivujete.


### Aktivovať všetkých šesť lúčov naraz

Môžete aktivovať všetkých šesť lúčov ťuknutím na ikonu krúžka na obrazovke.


<sup>1</sup> Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. *J Am Acad Audiol*. 31(6):404-411. doi: 10.3766/jaaa.19060.

## Vytvorenie vlastného režimu


Ak často používate špecifický vzor lúčov, môžete si ho pomocou aplikácie uložiť ako vlastný režim. Potom môžete prístup k tomuto vzoru lúčov získať priamo na zariadení Roger On alebo jedným ťuknutím v aplikácii. Môžete si uložiť až dva vlastné režimy, môžete k nim mať kedykoľvek prístup a kedykoľvek ich môžete vymazať.

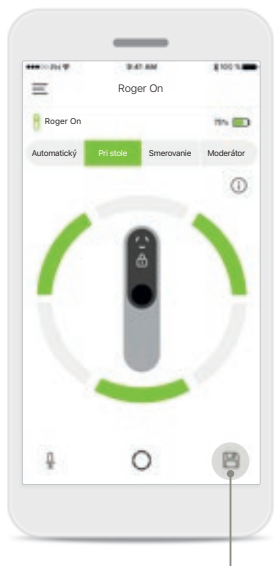


**Uloženie vlastného režimu**  
Po uložení vzoru lúčov, ktorý často používate, ho ťuknutím na ikonu Uložiť uložíte ako vlastný režim. Môžete uložiť až dva vlastné režimy.

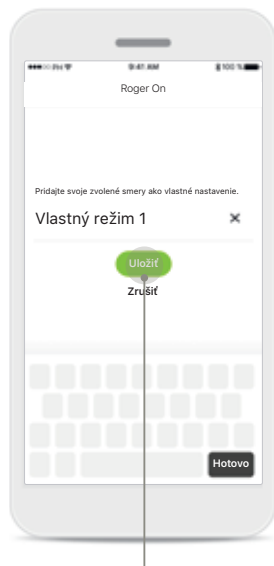

**Pomenovanie vlastného režimu**  
Môžete dať svojmu vzoru lúčov vlastný názov a potom ťuknite na možnosť **Uložiť**.

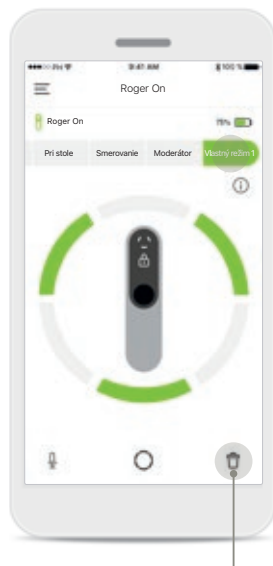


**Získanie prístupu a odstránenie vlastného režimu**  
Uložený vlastný režim sa zobrazí ako manuálny režim v zozname režimov mikrofónu. Vlastný režim môžete odstrániť ťuknutím na ikonu Odstrániť.

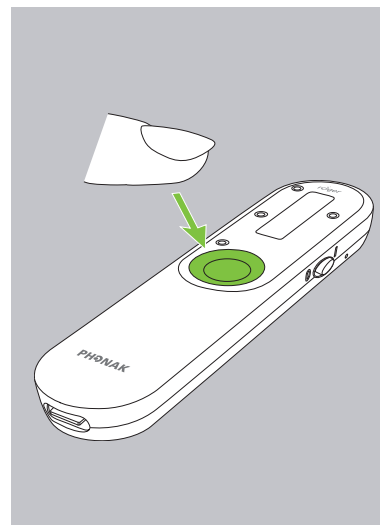


**Prístup k vlastnému režimu pomocou zariadenia Roger On**  
Vlastný režim môžete aktivovať aj na zariadení Roger On. Opakovane stláčajte funkčné tlačidlo na zariadení Roger On, kým sa neaktivuje vlastný režim.

# Technológia MultiBeam 2.0


Ak nosíte na oboch ušiach načúvacie prístroje/kochleárne implantáty vybavené technológiou RogerDirect vyrobených spoločnosťou Sonova, môžete MultiBeam 2.0 povoliť. Keď položíte zariadenie Roger On do stredu stola, technológia MultiBeam 2.0 vám umožní počuť zo smeru, odkiaľ niekto rozpráva. Túto funkciu môžete používať len so zamknutým režimom Pri stole.

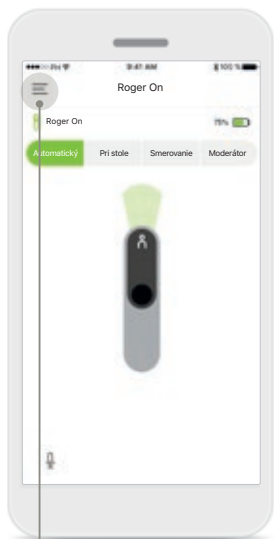


**Prístup k ponuke**  
Ťuknutím na ikonu s tromi prúžkami získate prístup k ponuke.

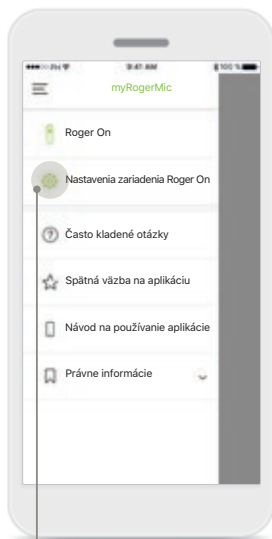


**Prístup k nastaveniam**  
Ťuknite na nastavenia zariadenia Roger On.

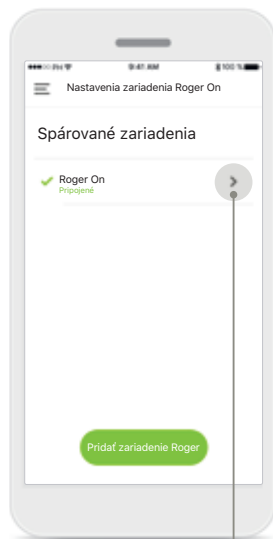

**Výber zariadenia Roger On**  
Ťuknite na šípku vedľa príslušného zariadenia Roger On.

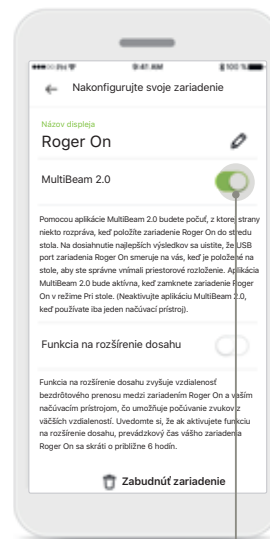


**Aktivácia MultiBeam 2.0**  
Ťuknutím na posuvný ovládač MultiBeam 2.0 aktivujete túto funkciu. Nastavenia sú teraz uložené a zariadenie Roger On teraz aktivuje funkciu MultiBeam 2.0 zakaždým, keď manuálne prepnete na režim Pri stole.

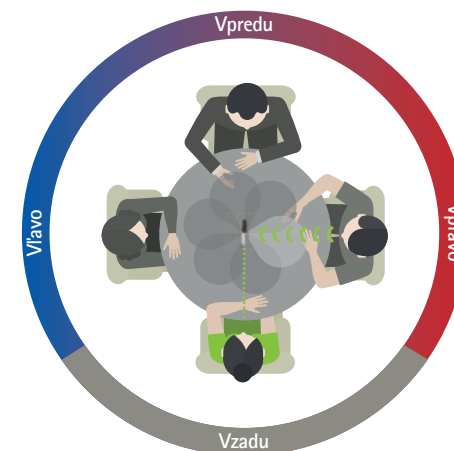

**Použitie na stole**  
Umiestnite zariadenie Roger On do stredu stola a uistite sa, že nabíjací port smeruje na vás. Potom zamknite zariadenie Roger On v režime pri stole pomocou aplikácie alebo stlačením funkčného tlačidla.

## Pridanie, výber a odstránenie zariadenia (zariadení) Roger On

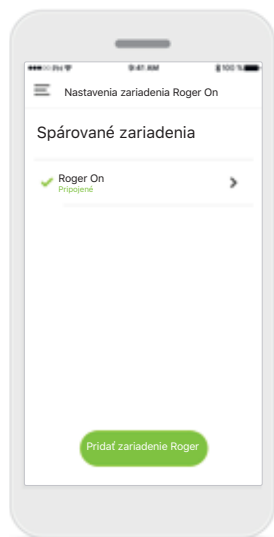


### Pridanie nového zariadenia Roger On

V hlavnej navigácii aplikácie prejdite na stránku nastavenia zariadenia Roger On a ťuknite na tlačidlo **Pridať zariadenie Roger**.




### Výber medzi viacerými zariadeniami

Po dokončení procesu párovania sa zobrazia pokyny pre výber zariadenia Roger On, ktoré chcete používať.

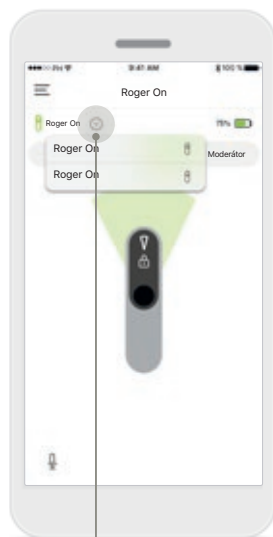


### Výber medzi viacerými zariadeniami

Ak je s aplikáciou spárované viac ako jedno zariadenie Roger On, na domovskej obrazovke sa objaví šípka. Ťuknutím na šípku vyberte zariadenie, ktoré chcete ovládať pomocou aplikácie.

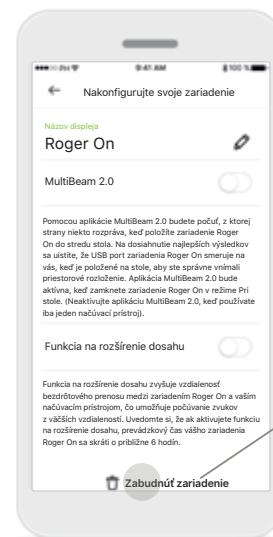

### Odstránenie zariadenia Roger On

V nastaveniach zariadenia Roger v hlavnej navigácii aplikácie vyberte zariadenie Roger On, ktoré chcete odstrániť. Ťuknite na ikonu **Zabudnúť zariadenie** v spodnej časti stránky.

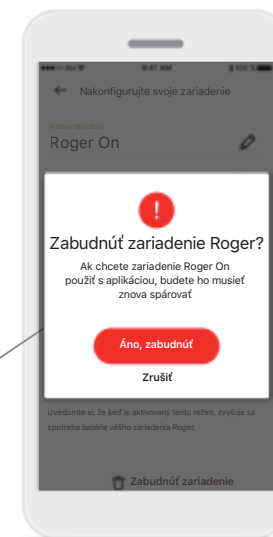


### Potvrdenie odstránenia zariadenia Roger On

Ťuknutím na tlačidlo **Áno, zabudnúť** potvrdíte, že chcete odstrániť toto zariadenie Roger On.

## Sieť MultiTalker

Mikrofón vášho zariadenia Roger On sa dá skombinovať s mikrofónmi iných zariadení Roger, napr. Roger Table Mic II, čo vám umožňuje počúvať väčšiu skupinu alebo viacerých vzdialených hovoriacich. Informácie o tom, ako pripojiť ďalší mikrofón k vášmu zariadeniu Roger On, nájdete v kapitole 13 v návode na použitie zariadenia Roger On. Keď sa zariadenie Roger On používa s ďalšími mikrofónmi v sieti MultiTalker, automaticky sa prepne do režimu Moderátor (1). Keď položíte zariadenie Roger On na stôl, alebo keď ho držíte v ruke, automaticky sa stlmí. Aplikácia automaticky zobrazí váš mikrofón ako stlmený a poskytne pokyny na opätovné zapnutie mikrofónu (2). Ak znova zapnete mikrofón svojho zariadenia Roger On (dlhým stlačením funkčného tlačidla v strede mikrofónu), ďalšie pripojené mikrofóny (t. j. mikrofóny v tej istej sieti MultiTalker) sa automaticky zablokujú. Toto sa tiež zobrazí v aplikácii myRogerMic (3).

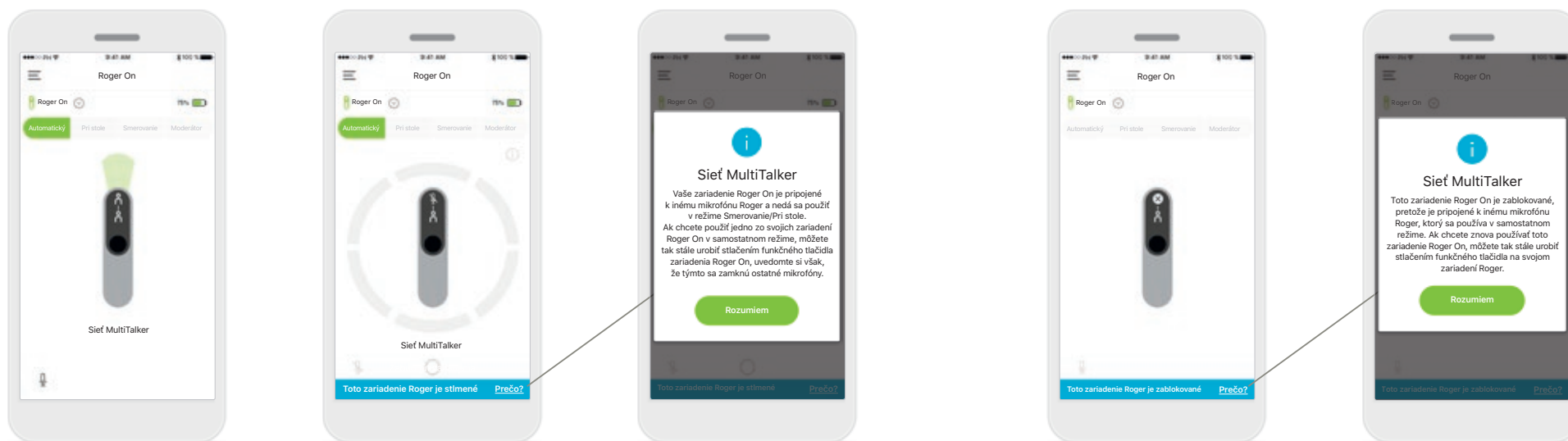

### 1. Sieť MultiTalker

Aplikácia zobrazí automatický režim Moderátor, keď je vaše zariadenie Roger On pripojené k inému mikrofónu Roger.


### 2. Stlmené zariadenie Roger On

Váš mikrofón je stlmený, pretože ho nepoužívate v režime Moderátor. Ťuknutím na tlačidlo **Prečo** sa dozviete, prečo je to tak, a ako môžete znova zapnúť mikrofón.

### 3. Zablokované zariadenie Roger On


Váš mikrofón je zablokovaný, pretože iný pripojený mikrofón než váš sa používa v samostatnom režime (režim Smerovanie alebo režim Pri stole v sieti MultiTalker a so zapnutým mikrofónom). Ťuknutím na tlačidlo **Prečo** sa dozviete, ako ho môžete odblokovať.

## Ďalšie funkcie

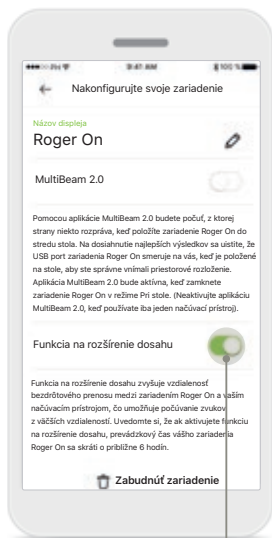


### Funkcia na rozšírenie dosahu

Funkciu na rozšírenie dosahu môžete aktivovať v nastaveniach zariadenia Roger On v hlavnej navigácii aplikácie. Táto funkcia vám umožňuje počúvať zvuky z ešte väčšej diaľky, pretože zvyšuje vzdialenosť bezdrôtového prenosu medzi zariadením Roger On a načúvacími prístrojmi.

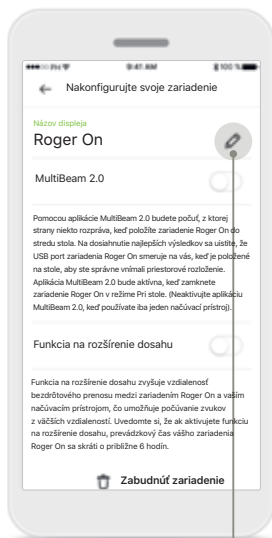

### Pomenovanie zariadenia Roger On

Vyberte zariadenie Roger On, ktoré chcete pomenovať, a premenujte ho ťuknutím na ikonu úpravy (ceruzka).

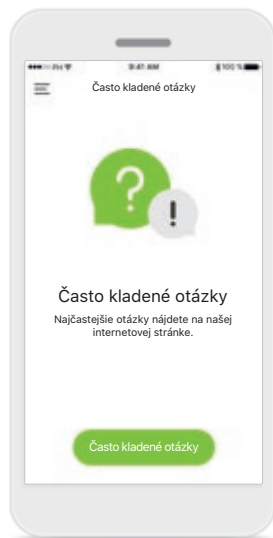

### Často kladené otázky

Prístup k často kladeným otázkam získate na našej externej internetovej stránke z tejto stránky.

## Dôležité bezpečnostné informácie



Za používanie svojho osobného smartfónu nesiete osobnú zodpovednosť. Narábajte so smartfónom a používajte aplikáciu opatrne.



Zmena režimu mikrofónu alebo použitie riadenia smeru prenosu môže znížiť počuteľnosť výstražných alebo bezpečnostných signálov. Môže dôjsť k nebezpečným situáciám.



Ak zariadenie Roger On nereaguje na zariadenie z dôvodu nezvyčajného rušivého poľa, vzdialte sa od takéhoto rušivého poľa.



Ak zariadenie Roger On nereaguje, skontrolujte, či je zariadenie Roger On zapnuté, či nie je vybitá batéria, a či je v dosahu štandardného pripojenia Bluetooth LE.



Ak chcete získať bezplatnú tlačенú kópiu návodu na použitie, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti Sonova. Kópia vám bude zaslaná do 7 dní.



Zapnite funkciu Bluetooth. Funkcia Bluetooth musí byť zapnutá, aby bolo možné pripojiť vaše zariadenie Roger On.



Neaktivujte funkciu MultiBeam 2.0, ak používate len jeden načúvací prístroj. Môže dôjsť k zníženiu výkonnosti vášho načúvacieho prístroja.

## Vysvetlenie symbolov



Tento symbol označuje, že je dôležité, aby si používateľ prečítal a zohľadnil príslušné informácie uvedené v tomto návode na použitie.



Tento symbol označuje, že je dôležité, aby používateľ venoval pozornosť príslušným výstražným upozorneniam v tomto návode na použitie.



Dôležité informácie pre manipuláciu a bezpečnosť výrobku.



Označením symbolom CE spoločnosť Sonova AG potvrdzuje, že tento výrobok Phonak spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach. Certifikácia CE udelená v roku 2020.

**Distibútor pre Slovenskú republiku:**

Artsonic s. r. o.

so sídlom Radlinského 27,

811 07 Bratislava

[www.artsonic.sk](http://www.artsonic.sk)

[www.phonak.sk](http://www.phonak.sk)

[www.audiodom.sk](http://www.audiodom.sk)



Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa, Švajčiarsko

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



Sonova Deutschland GmbH

Max-Eyth-Straße 20

70736 Fellbach-Oeffingen, Nemecko